



## Blutabnahme für QuantiFERON-Tb-Gold-Plus Test

- 1. Probenannahme: Mo – Do: 07:30 bis 15:30 Uhr**  
**Am Freitag, Samstag, Sonntag und an Werktagen vor einem Feiertag bzw. an einem Feiertag ist keine Probenannahme möglich! CAVE: Am Faschingsdienstag ist das Labor nur bis 11:30 besetzt!**  
 Proben müssen am Tag der Blutentnahme bis spätestens 15:30 Uhr im Labor eingelangt sein. Bei späterem Einlangen ggf. keine Bearbeitung möglich.  
**HINWEIS:** Für den Transport der QuantiFERON-Tb-Gold-Plus Proben zur Analyse (Ausnahme LKH Feldkirch) ist eine telefonische Anmeldung bei der Fahrerkoordination des MZL unter Tel.: 05522 3480 370 zwingend erforderlich.
- 2. Blutröhrchen und Infektionsserologischen Begleitschein korrekt beschriften.**  
**CAVE:** ohne Angabe des Entnahmedatums und -uhrzeit keine Bearbeitung!
- 3. Verfallsdatum aller vier Röhrchen prüfen:** nach Ablauf des Verfallsdatums KEINE Bearbeitung! Bitte Patientenetiketten so aufkleben, dass das Verfallsdatum sichtbar bleibt.
- 4. Blutabnahme:** 0,8 bis 1,2 ml in jedes der **vier Blutröhrchen** (zur Orientierung schwarze Markierung), Röhrchen bei Raumtemperatur lagern!

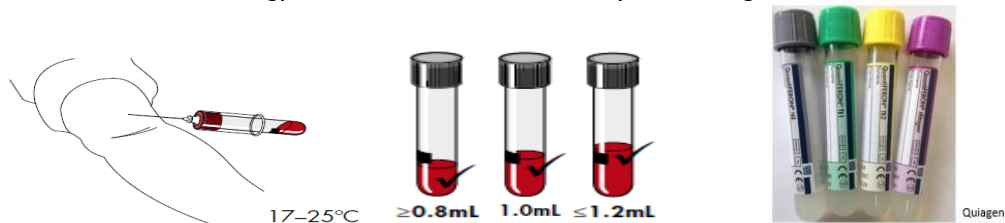

- 5. Mischen Sie die Röhrchen durch 10-maliges Kippen,** sodass das an der Röhrcheninnenwand aufgetragene, getrocknete TB-Antigen vollständig mit Blut vermischt wird.

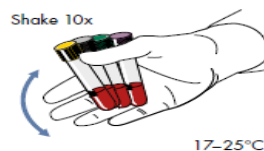

- 6. Versand:** Blutröhrchen wie üblich (mit Rohrpost, Hol- und Bringdienst oder Versandtaschen (grüne Beschriftung, „Quantiferon“-Kennzeichnung) per Post oder Kurier, etc. verschicken.



- Nachfragen bitte schriftlich an [serologie@lkhf.at](mailto:serologie@lkhf.at) oder unter der Telefonnummer **+43 5522 303 3440**.
- Materialbestellung über das Formular [Materialanforderungsschein](#)

|                                              |                   |                                                        |
|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Verfasst/Überarbeitet: Carolin Thurnher BSc. | Datum: 15.06.2026 | Datei: Einsendeinformation QFT Gold Plus (Quantiferon) |
| Evaluiert: FÄ Dr. Susanna Neumayer           | Datum: 15.06.2026 | Version: 4                                             |
| Freigegeben: FÄ Dr. Susanna Neumayer         | Datum: 15.06.2026 | Gültig ist die jeweils aktuelle digitale Version!      |